



L'utilisation de l'Accu-Chek® Safe-T-Pro Uno est simple et intuitive.

Il n'y a que 2 simples étapes à réaliser.

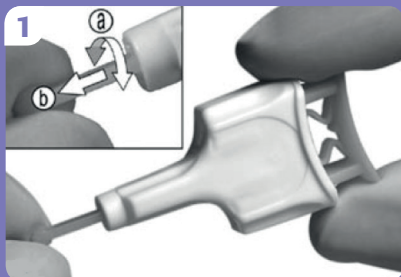

1. Tournez le manchon stérile successivement d'un quart de tour vers l'avant puis vers l'arrière, ou inversement (a) et retirer le manchon (b).

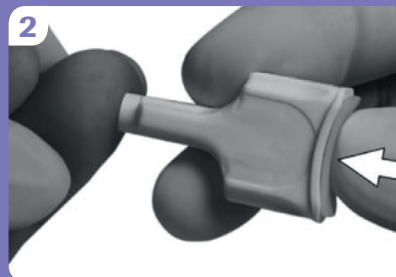

2. Tenez le piqueur entre l'index, le majeur et le pouce. Poussez fermement le piqueur contre la zone de piqure choisie. Enfoncez complètement le bouton jaune.

Préparation de la collecte de sang

- Nous recommandons de collecter du sang capillaire sur le côté du bout du doigt, car cette zone est l'une des moins douloureuses. Tous les doigts peuvent être utilisés.
- Demandez au patient de se laver les mains avec de l'eau chaude et du savon, puis de les sécher correctement. Ceci assure une zone de piqure propre et stimule la circulation sanguine.
- Si des lingettes à base d'alcool sont utilisées, le doigt doit également être complètement séché avant de continuer.

Collecte du sang

- Massez doucement de la base du doigt vers le bout du doigt afin de stimuler la formation d'une goutte de sang.
- Pour certains tests diagnostiques, le bout du doigt ne peut être compressé ou massé trop énergiquement car cela pourrait donner des résultats incorrects.
- Pour votre propre sécurité, portez toujours des gants quand vous collectez du sang.

Découvrez un monde de possibilités.

Pour plus d'information, veuillez consulter la notice explicative ou appelez gratuitement l'Accu-Chek® Service au



ACCU-CHEK et SAFE-T-PRO sont des marques de Roche. © 2013 Roche Diagnostics.

www.accu-chek.be
Roche Diagnostics Belgium NV/SA
Schaarbeeklei 198
1800 VILVOORDE

ACCU-CHEK®