



Pollinosan® Hooikoorts neusspray

Behandelt en voorkomt
hooikoorts en vergelijkbare
allergische reacties

Lees deze informatie zorgvuldig voor gebruik van A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray. Gooi deze gebruiksaanwijzing niet weg, het bevat belangrijke informatie. Wanneer u vragen heeft over dit product, stel deze dan aan uw arts of neem contact op met de fabrikant.

Wat is A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray en waarvoor gebruikt u het?

- A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray is een neusspray voor de behandeling en het voorkomen van hooikoorts.
- A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray is een medisch hulpmiddel en bevat een klinisch bewezen effectieve combinatie van Ectoin® en zeezout. Ectoin® is een 100% natuurlijk ingrediënt met celbeschermende en ontstekingsremmende eigenschappen.
- A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray is een licht hypertone oplossing. Het vermindert de schadelijke invloeden van allergenen in de lucht. Het ondersteunt het herstel van geïrriteerd neusslijmvlies veroorzaakt door allergenen.
- A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray vermindert door allergenen veroorzaakte ontstekingen van het neusslijmvlies. Het verlicht allergische symptomen, zoals loopneus, jeukende neus en verstopte neus.
- A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray bevat geen conserveringsmiddelen.
- A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray is geschikt voor een gevoelige neus.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Dit middel niet gebruiken wanneer u overgevoelig bent voor Ectoin® of een van de andere ingrediënten. Dit middel niet gebruiken als zich een allergische reactie voordoet. U dient dan onmiddellijk te stoppen met het gebruik van A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray.

Niet gebruiken als het product beschadigd is. Uit hygiënisch oogpunt mag elke verstuiver slechts door één persoon worden gebruikt. Na opening is het product nog 3 maanden houdbaar. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Wat moet u weten voordat u A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray gebruikt?
Er zijn geen interacties bekend tussen A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray en andere neussprays.

Hoe gebruikt u A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray?

Gebruik A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray altijd volgens deze instructies voor gebruik. Naar behoefte meerdere keren per dag 1-2x sprayen per neusgat, tenzij anders is geadviseerd.

Kinderen jonger dan 2 jaar mogen niet meer dan 10 applicaties (van 2 verstuivingen per neusgat) per dag. Kinderen van 10 jaar en jonger en mensen die niet in staat zijn om deze spray zelfstandig te gebruiken, moeten door een volwassene geholpen worden bij de toediening van deze spray. Indien nodig kan de neusspray gerust langer worden gebruikt. Zonder onderbreking tot maximaal 30 dagen. Geeft geen gewenningseffect.

Bij het eerste gebruik: verwijder het beschermdeop van het flesje en druk meerdere malen (2-3 keer pompen) op de spraykop totdat er nevel ontstaat. Knip de punt niet af. Als de verstuifingsfunctie is verminderd (wat kan gebeuren als de fles niet rechtop staat), druk meerdere keren op de spraykop en houdt het flesje daarbij rechtop.



1. Snuit zachtjes de neus.
2. Verwijder het beschermdeop van het flesje.
3. Houd het flesje vast met je wijsvinger en middelvinger aan weerszijden van de spraykop en je duim onder de spraykop. Buig je hoofd iets naar voren en sluit een neusgat door zachtjes met je vinger druk tegen de zijkant van je neus te zetten.
4. Begin voorzichtig door uw neus te ademen.
5. Breng de spraykop in het neusgat. Druk de pomp snel en stevig naar beneden en spray in uw neusgat. Blijf tegelijkertijd rustig door de neus ademen.
6. Breng de spraykop in uw andere neusgat.
7. Herhaal de hierboven beschreven stappen voor het andere neusgat.
8. Veeg de spraykop na ieder gebruik af.
9. Plaats het dopje er direct weer op.

Gebruik tijdens zwangerschap of borstvoeding
Als deze spray wordt toegepast volgens de gebruiksaanwijzing, is er geen bewijs voor een bepaald risico tijdens zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding.

Mogelijke bijwerkingen

Mits gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing wordt dit middel goed verdragen. Regelmatig voorkomende of aanhoudende bijwerkingen zijn tot nu toe niet bekend. Merk u wel bijwerkingen na gebruik van dit middel goed dit dan zeker door aan uw arts of aan A.Vogel N.V. Neem contact op met uw arts of apotheker als de bijwerkingen aanhouden of verergeren.

Ingrediënten

Ectoin®, zeezout, water
Geen conserveringsmiddelen
1 spray bevat 0,14 ml oplossing

Bewaren
De vervaldatum van A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray staat vermeld op de verpakking en op de flacon. Niet gebruiken na de vervaldatum.
Bewaren tussen 2°C - 25°C.
Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Verpakking

A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray is verkrijgbaar bij een verpakking van 20 ml.

Naast A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray is er ook A.Vogel Pollinosan Hooikoorts oogdruppels verkrijgbaar. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Zorg voor het milieu

A.Vogel streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. Daarom maken we zoveel mogelijk gebruik van milieuvriendelijk geproduceerde verpakkingsmaterialen. Deze materialen hebben bij verbranding geen schadelijke effecten op het milieu of zijn geschikt voor recycling.

Tips

- Ga wandelen of sporten na een regenbui of 's ochtends vroeg, dan is de concentratie stuifmeel in de lucht het laagst.
- Probeer stuifmeelrijke gebieden te vermijden. Strand en bergstreken zijn te verkiezen boven weide- en bosgebieden.
- Zorg voor een goede hygiëne en ventilatie in uw woning. Plaats horren voor ramen en deuren om het binnendringen van pollen tegen te gaan.
- Houd de luchtvochtigheid in huis tussen de 40 en 60 procent.
- Draag een zonnebril om de ogen tegen stuifmeel te beschermen.
- Wrijf zo min mogelijk in de ogen en aan de neus.

Persoonlijk advies

We kennen allemaal de bouwstenen voor een gezond leven: gevarieerde en gezonde voeding, verantwoord bewegen en voldoende afwisseling in werk en ontspanning. Als het nodig is, helpt A.Vogel met een natuurlijk gezondheidsproduct om daarmee het zelfherstellende vermogen van het lichaam extra te ondersteunen. Wij geven u hierover graag meer informatie of een persoonlijk advies. Kijk op www.avogel.be, stuur een e-mail naar info@avogel.be of bel met de A.Vogel infolijn op het nummer +32 (0) 13 35 89 40.

A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray is een medisch hulpmiddel.

Inhoud 20 ml



bitop AG
Stockumer Str. 28, 58453 Witten, Germany

Distributeur België

A.Vogel N.V.
Bosstraat 54, B-3560 Lummen,
www.avogel.be

De tekst op deze gebruiksaanwijzing werd voor het laatst goedgekeurd in oktober 2020.



Pollinosan® spray nasal Rhum des foin

Traite et prévient le rhume
des foin et les réactions
allergiques similaires.

Lisez attentivement ces informations avant d'utiliser le spray nasal A.Vogel Pollinosan Rhume des foin. Ne jetez pas ce mode d'emploi, il contient des informations importantes. Si vous avez des questions sur ce produit, demandez à votre médecin ou contactez le fabricant.

Qu'est-ce que le spray nasal A.Vogel Pollinosan Rhume des foin et quelle est son utilisation ?

- Le spray nasal A.Vogel Pollinosan Rhume des foin est un spray nasal pour le traitement et la prévention du rhume des foin.
- Le spray nasal A.Vogel Pollinosan Rhume des foin est un dispositif médical qui contient une combinaison à l'efficacité cliniquement prouvée d'Ectoin® et de sel marin. L'Ectoin® est un ingrédient 100% naturel aux propriétés anti-inflammatoires et protectrices des cellules.
- Le spray nasal A.Vogel Pollinosan Rhume des foin est une solution hypertonique douce, qui réduit les influences néfastes des allergènes dans l'air et favorise le rétablissement de la muqueuse nasale irritée par des allergènes.
- Le spray nasal A.Vogel Pollinosan Rhume des foin réduit l'inflammation de la muqueuse nasale causée par les allergènes. Il soulage les symptômes allergiques, tels que l'écoulement nasal, les démangeaisons nasales et la congestion nasale.
- Le spray nasal A.Vogel Pollinosan Rhume des foin ne contient aucun conservateur.
- Le spray nasal A.Vogel Pollinosan Rhume des foin convient également en cas de nez sensible.

Avertissements et mesures de précaution

N'utilisez pas ce produit si vous êtes hypersensible à l'Ectoin® ou à un autre ingrédient.
N'utilisez pas ce produit si une réaction allergique se produit. Vous devez arrêter immédiatement d'utiliser le spray nasal A.Vogel Pollinosan Rhume des foin, le cas échéant.
Ne pas utiliser si le produit est endommagé.
Pour des raisons d'hygiène, nous recommandons l'utilisation du spray par une seule et même personne. Le produit se conserve 3 mois après ouverture. Tenir hors de portée et de la vue des enfants.

Que devez-vous savoir avant d'utiliser le spray nasal A.Vogel Pollinosan Rhume des foin ?
Il n'y a pas d'interactions connues entre le spray nasal A.Vogel Pollinosan Rhume des foin et d'autres sprays nasaux.

Que devez-vous savoir avant d'utiliser le spray nasal A.Vogel Pollinosan Rhume des foin ?

Utilisez toujours le spray nasal A.Vogel Pollinosan Rhume des foin conformément à ce mode d'emploi. Au besoin, vaporiser 1-2x par narine plusieurs fois par jour, sauf avis contraire.
Les enfants de moins de 2 ans ne doivent pas dépasser 10 applications (de 2 vaporisations par narine) par jour. Les enfants de moins de 10 ans et les personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser ce spray de manière autonome doivent être aidés par un adulte pour l'administration de ce spray.
Si nécessaire, le spray nasal peut être utilisé pendant une période plus longue. Sans interruption jusqu'à un maximum de 30 jours consécutifs. Ne produit pas d'accoutumance.
Lors de la première utilisation : retirez le capuchon de protection du flacon et appuyez plusieurs fois (2 à 3 fois) sur la tête de vaporisation jusqu'à ce qu'une brume apparaisse. Ne coupez pas l'extrémité. Si la fonction de brumisation est réduite (ce qui peut arriver si le flacon n'est pas droit), appuyez plusieurs fois sur la tête de vaporisation, en maintenant le flacon droit.



1. Mouchez doucement le nez.
2. Retirez le capuchon de protection du flacon.
3. Tenez le flacon avec l'index et le majeur de chaque côté de la tête de vaporisation et le pouce au bas de la bouteille. Penchez la tête légèrement en avant et fermez une narine en appuyant doucement votre doigt sur la côté de votre nez.
4. Commencez par respirer prudemment par le nez.
5. Appliquez la tête de vaporisation dans la narine. Enfoncez rapidement et vigoureusement la pompe et vaporisez le produit dans la narine. Continuez à respirer tranquillement par le nez.
6. Appliquez le spray dans l'autre narine.
7. Répétez les étapes ci-dessus dans l'autre narine.
8. Essayez la tête de vaporisation après chaque utilisation.
9. Refermez le spray avec le capuchon de protection.

Utilisation pendant la grossesse ou l'allaitement

Lorsque ce spray est utilisé conformément au mode d'emploi, il n'y a pas de preuve d'un risque spécifique pendant la grossesse et l'allaitement.

Les effets secondaires possibles

Le produit est généralement bien toléré lorsqu'il est utilisé dans les quantités conseillées. Aucun effet secondaire régulier ou persistant n'a été signalé à ce jour. Si vous observez des effets secondaires après avoir utilisé ce produit, veuillez en informer votre médecin ou A.Vogel N.V. Contactez votre médecin ou votre pharmacien si les effets secondaires persistent ou s'aggravent.



Ingrédients

Ectoine, sel marin, eau
Sans conservateurs
1 vaporisation contient 0,14 ml de solution.

Conservation

À conserver à une température comprise entre 2 et 25°C. Tenir hors de portée et de la vue des jeunes enfants. Se conserve 3 mois après ouverture. Ne pas utiliser après la date de péremption. La date de péremption du spray nasal A.Vogel Pollinosan Rhume des foins est indiquée sur l'emballage et sur le flacon.

Présentation

Le spray nasal A.Vogel Pollinosan Rhume des foins est disponible en emballage de 20 ml. En plus du spray nasal A.Vogel Pollinosan Rhume des foins, des gouttes oculaires A.Vogel Pollinosan Rhume des foins sont également disponibles. Dispositif médical - lire les instructions avant utilisation.

Protéger l'environnement

A.Vogel a pour philosophie de peser le moins possible sur l'environnement. C'est pourquoi nous favorisons autant que possible l'utilisation de matériaux d'emballage fabriqués selon des procédés qui ne nuisent pas à l'environnement. Ces matériaux n'ont aucun effet nocif sur l'environnement en cas d'incinération et sont tout à fait recyclables.

Conseils

- Faites votre promenade ou votre sport après une pluie ou tôt le matin, lorsque la concentration de pollen dans l'air est la plus faible.
- Essayez d'éviter les zones riches en pollen. Les zones de plage et de montagne sont préférables aux zones de prairie et de forêt.
- Veillez à une bonne hygiène et à une bonne ventilation dans votre maison. Placez des moustiquaires devant les fenêtres et les portes pour empêcher le pollen de pénétrer
- Maintenez le taux d'humidité dans votre maison entre 40 et 60%.
- Portez des lunettes de soleil pour protéger vos yeux du pollen.
- Frottez le moins possible vos yeux et votre nez.

Conseil personnel

Nous savons tous qu'une vie saine repose sur une alimentation saine et variée, suffisamment d'exercice et une alternance suffisante entre travail et détente. Si nécessaire, A.Vogel peut vous y aider avec un produit de santé naturel pour ainsi donner un coup de pouce au pouvoir autogénérateur de votre corps. Nous nous ferons un plaisir de vous donner davantage d'informations ou un conseil personnel. Surfez sur www.avogel.be, envoyez un e-mail à info@avogel.be ou contactez nos conseillers par téléphone au +32 (0) 13 35 89 40.

Le spray nasal A.Vogel Pollinosan Rhume des foins est un dispositif médical.

Contenu 20 ml

Fabricant :

bitop AG
Stockumer Str. 28,
58453 Witten, Germany

Distributeur pour la Belgique

A.Vogel N.V. Bosstraat 54
B-3560 Lummen, www.avogel.be

Le texte de cette notice a été revu pour la dernière fois en octobre 2020.



Pollinosan® Heuschnupfen- Nasenspray

Behandelt und verhindert
Heuschnupfen und ähnliche
allergische Reaktionen.

Lesen Sie diese Informationen vor der Verwendung von A.Vogel Pollinosan Heuschnupfen-Nasenspray sorgfältig durch. Werfen Sie die Gebrauchsanweisung nicht weg, da sie wichtige Informationen enthält. Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Was ist A.Vogel Pollinosan Heuschnupfen-Nasenspray und wofür können Sie es verwenden?

- A.Vogel Pollinosan Heuschnupfen-Nasenspray ist ein Nasenspray zur Behandlung und Vorbeugung von Heuschnupfen.
- A.Vogel Pollinosan Heuschnupfen-Nasenspray ist ein Medizinprodukt und enthält eine klinisch erprobte, wirksame Kombination aus Ectoin® und Meersalz. Ectoin® ist ein 100 % natürlicher Inhaltsstoff mit zellschützenden und entzündungsreduzierenden Eigenschaften.
- A.Vogel Pollinosan Heuschnupfen-Nasenspray ist eine leicht hypertensive Lösung. Sie reduziert die schädlichen Einflüsse von Allergenen in der Luft. Sie unterstützt die Erholung der durch Allergene gereizten Nasenschleimhaut.
- A.Vogel Pollinosan Heuschnupfen-Nasenspray verringert durch Allergene verursachte Entzündungen der Nasenschleimhaut. Es mildert allergische Symptome, darunter eine laufende, juckende und verstopfte Nase.
- A.Vogel Pollinosan Heuschnupfen-Nasenspray enthält keine Konservierungsstoffe.
- A.Vogel Pollinosan Heuschnupfen-Nasenspray ist für empfindliche Nasen geeignet.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie überempfindlich gegen Ectoin® oder einen der anderen Inhaltsstoffe sind. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn eine allergische Reaktion auftritt. Sie sollten die Anwendung von A.Vogel Pollinosan Heuschnupfen-Nasenspray dann sofort beenden.

Bei Beschädigung des Produkts nicht verwenden.

Aus hygienischen Gründen darf jedes Spray nur von einer Person verwendet werden. Nach Öffnung ist das Produkt noch 3 Monate haltbar. Außerhalb der Reichweite und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

Was müssen Sie wissen, bevor Sie das A.Vogel Pollinosan Heuschnupfen-Nasenspray anwenden?

Es sind keine Wechselwirkungen zwischen A.Vogel Pollinosan Heuschnupfen-Nasenspray und anderen Nasensprays bekannt.

Wie wenden Sie das A.Vogel Pollinosan Heuschnupfen-Nasenspray an?

Wenden Sie das A.Vogel Pollinosan Heuschnupfen-Nasenspray vor Gebrauch immer gemäß dieser Gebrauchsanweisung. Nach Bedarf *mehrere Male pro Tag 1-2x in jedes Nasenloch sprühen*, sofern nicht anders empfohlen.

Kinder unter 2 Jahren sollten nicht mehr als 10 Anwendungen (von 2 Sprühdosen pro Nasenloch) pro Tag erhalten. Kinder bis 10 Jahre und Personen, die das Nasenspray nicht ohne fremde Hilfe anwenden können, sollten bei der Nutzung dieses Sprays von einem Erwachsenen unterstützt werden. Sofern erforderlich kann das Nasenspray ohne Bedenken länger verwendet werden. Darf bis maximal 30 Tage ununterbrochen angewendet werden. Kein Gewöhnungseffekt.

Bei der ersten Anwendung: Entfernen Sie die Schutzkappe von der Flasche und drücken Sie mehrmals (2-3 Pumpen) auf den Sprühkopf, bis Nebel entsteht. Die Spitze nicht abschneiden. Wenn die Zerstäubungsfunktion reduziert ist (wenn die Flasche nicht aufrecht steht), drücken Sie den Sprühkopf mehrmals, während Sie die Flasche aufrecht halten.

- Die Nase sanft schnäuzen.
- Die Schutzkappe entfernen.
- Halten Sie die Flasche mit Zeige- und Mittelfinger auf beiden Seiten des Sprühkopfs und legen Sie den Daumen unter den Sprühkopf. Beugen Sie den Kopf leicht nach vorne und schließen Sie ein Nasenloch, indem Sie mit dem Finger sanft auf den Nasenflügel drücken.
- Atmen Sie vorsichtig durch die Nase ein.
- Führen Sie den Sprühkopf in das Nasenloch ein. Drücken Sie die Pumpe schnell und fest nach unten und sprühen Sie in Ihr Nasenloch. Atmen Sie dabei weiterhin sanft durch die Nase ein.
- Führen Sie den Sprühkopf in Ihr anderes Nasenloch ein.
- Wiederholen Sie die hier oben beschriebenen Schritte für das andere Nasenloch.
- Wischen Sie den Sprühkopf nach jeder Anwendung ab.
- Verschließen Sie das Spray direkt nach der Anwendung.

Anwendung während der Schwangerschaft oder Stillzeit Bei vorschriftsmäßiger Anwendung dieses Sprays gibt es keine Hinweise auf ein besonderes Risiko während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Eventuelle Nebenwirkungen

Dieses Produkt ist bei vorschriftsmäßiger Anwendung gut verträglich. Bisher sind keine wiederkehrenden oder anhaltenden Nebenwirkungen bekannt. Wenn Sie nach der Anwendung dieses Arzneimittels Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder A.Vogel N.V. Kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheke, sollten die Beschwerden anhalten oder zunehmen.

Zutaten

Ectoin®, Meersalz, Wasser
Keine Konservierungsstoffe
1 Spray enthält 0,14 ml Lösung.

Aufbewahrung

Außerhalb der Reichweite und Sichtweite von Kindern aufbewahren. Zwischen 2 °C - 25 °C lagern. Nach Öffnung ist das Produkt noch 3 Monate haltbar. Nach dem Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum von Pollinosan Heuschnupfen-Nasenspray ist auf der Verpackung und auf dem Flakon angegeben.

Packungsgröße

A.Vogel Pollinosan Heuschnupfen-Nasenspray ist in einer Verpackung von 20 ml erhältlich. Neben A.Vogel Pollinosan Heuschnupfen-Nasenspray sind auch A.Vogel Pollinosan Heuschnupfen-Augentropfen erhältlich. Medizinprodukt: Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung.

Umweltschutz

A.Vogel strebt nach einer möglichst geringen Umweltbelastung. Darum verwenden wir möglichst umweltfreundlich hergestellte Verpackungsmaterialien. Diese Materialien haben bei Verwendung keine schädliche Wirkung auf die Umwelt oder können wiederverwertet werden.

Tipps

- Machen Sie einen Spaziergang oder treiben Sie Sport nach einem Regenschauer oder am frühen Morgen, wenn die Pollenkonzentration in der Luft am niedrigsten ist.
- Versuchen Sie, pollenreiche Gebiete zu meiden. Strand- und Berggebiete sind Wiesen- und Waldgebieten vorzuziehen.
- Achten Sie auf eine gute Hygiene und Belüftung in Ihrer Wohnung. Hängen Sie Moskitonetze vor Fenstern und Türen, um das Eindringen von Pollen zu verhindern.
- Halten Sie die Luftfeuchtigkeit im Haus zwischen 40 und 60 Prozent.
- Tragen Sie eine Sonnenbrille, um die Augen gegen Blütenstaub zu schützen.
- Vermeiden Sie möglichst, sich die Augen und die Nase zu reiben.

Persönliche Empfehlung

Wir alle wissen, dass ein gesundes Leben auf einer gesunden und abwechslungsreichen Ernährung, genügend Bewegung und einem ausreichenden Wechsel zwischen Arbeit und Entspannung beruht. Bei Bedarf kann A.Vogel Ihnen mit einem natürlichen Gesundheitsprodukt helfen um die sich selbst regenerierende Kraft Ihres Körpers zu stärken. Gerne geben wir Ihnen weitere Informationen oder persönliche Ratschläge. Surfen Sie zu www.avogel.be, senden Sie eine E-Mail an info@avogel.be oder kontaktieren Sie unsere Berater telefonisch unter +32 (0) 13 35 89 40.

A.Vogel Pollinosan Heuschnupfen-Nasenspray ist ein Medizinprodukt.

Inhalt 20 ml


Hersteller:

bitop AG
Stockumer Str. 28,
58453 Witten,
Deutschland

Verteiler Belgien

A.Vogel N.V.
Bosstraat 54, B-3560 Lummen
Tel. +32(0) 13 35 89 40
e-mail: info@avogel.be
www.avogel.be

Dieser Packungsbeilage wurde zuletzt im Oktober 2020 überarbeitet.

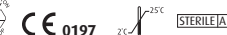

Niet gebruiken als het product beschadigd is / Ne pas utiliser si le produit est endommagé / Bei Beschädigung des Produkts nicht verwenden



Fabrikant / Fabricant / Hersteller



Te gebruiken tot / Date limite d'utilisation / Verwendbar bis



Lotnummer / Code de lot / Chargenbezeichnung



Voor gebruik gebruiksaanwijzing lezen / Lire la notice avant utilisation / Gebrauchsanweisung beachten



Temperatuurgrenzen / Limite de température / Temperaturbegrenzung



Het product is steriel door aseptische filtratie / Le produit est stérilisé par filtration aseptique / Sterilisation durch Anwendung aseptischer Verfahrenstechniken.



Aandacht: Gebruiksaanwijzing lezen (met betrekking tot waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen) / Attention: Lire les instructions d'utilisation (concernant les avertissements et précautions) / Achtung: Gebrauchsanweisung beachten (in Bezug auf Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen)



CE-symbol met notifiedbodynummer / Symbole CE avec numéro d'organisme notifié / CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

