

Information pour les patients

HYALO⁴ Regen



Indication

- Plaies aiguës et chroniques non infectées avec perte de substance

Instructions d'utilisation

En contact avec les exsudats, Hyalo4® Regen pansement se gélifie. Ce gel est absorbé et se dissout avec le temps. La plaie doit être vérifiée tous les 2-3 jours. Il est recommandé d'utiliser les pansements Hyalo4® Regen tous les 3 ou 4 jours ou à des intervalles plus rapprochés, en fonction de l'exsudat. Le produit qui n'est pas encore résorbé lors de la nouvelle application ne doit pas être retiré.

PHOTO 1 :

Enlevez la matière purulente et/ou les débris nécrotiques (débridement) et nettoyez la lésion avec de la solution physiologique.

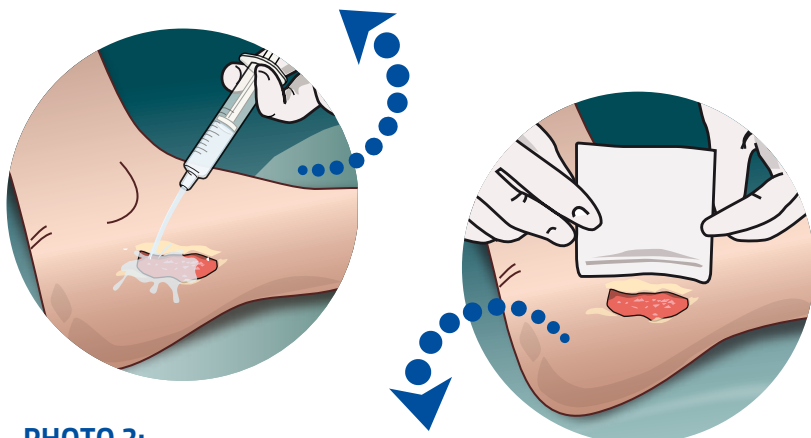


PHOTO 2:

Appliquez le pansement Hyalo4® Regen, la surface lisse en contact avec la plaie. Assurez-vous que le lit de la plaie est totalement couvert. Vous pouvez découper le pansement à la bonne taille de la plaie en utilisant des ciseaux ou un scalpel stériles. Ne réutilisez pas les restes du pansement. Le pansement Hyalo4® Regen n'est actif que s'il se gélifie sur le site de la plaie. Par conséquent, si la plaie est sèche, appliquez le pansement Hyalo4® Regen et humidifiez-le avec quelques gouttes de solution physiologique.

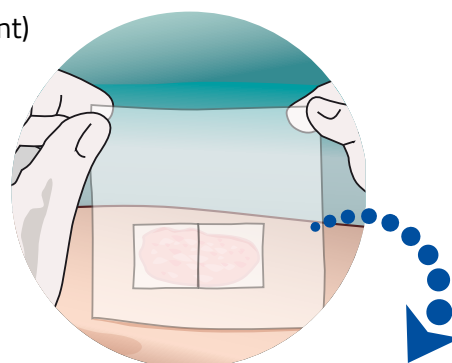


PHOTO 3:

Pour des plaies plus étendues, utilisez un ou plusieurs pansements, placés côte à côte ou se chevauchant si nécessaire, afin que la lésion soit totalement couverte. Couvrez avec une gaze stérile ou un pansement non adhésif à la capacité absorbante adaptée (vérification journalière du pansement secondaire).

- Ne pas combiner avec des sels d'ammonium quaternaire (Cedum benzalkonium, Aseptiderm, Cetavlex, H.A.C., Hacdil-S et Sterillium).

Nom pansement secondaire :

Conseil spécifique pour ce patient :

Nom docteur - infirmier / infirmière :

Numéro de téléphone :

Date de la dernière mise à jour : 02/2021